


Kurzanleitung

Viel Freude mit dem MediCheck!

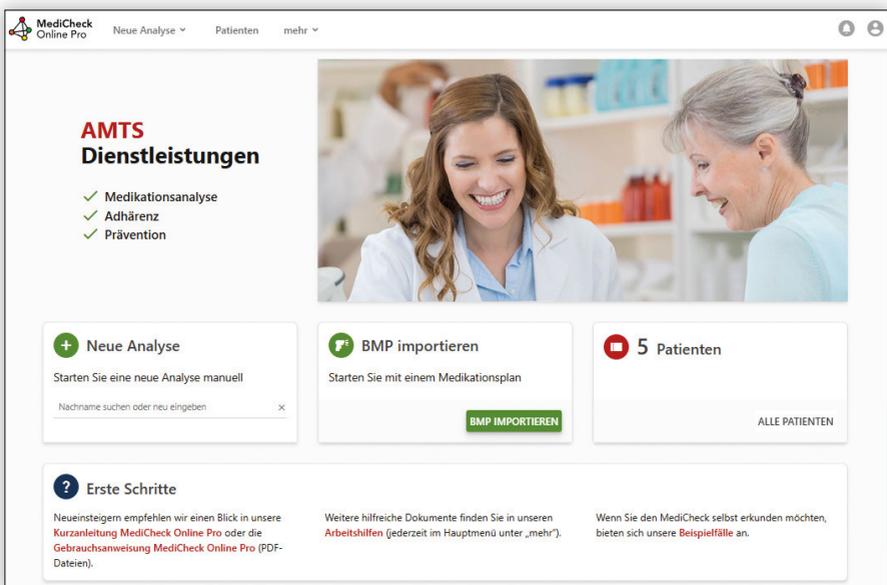

MediCheck Online Pro Neue Analyse ▾ Patienten mehr ▾

AMTS Dienstleistungen

- ✓ Medikationsanalyse
- ✓ Adhärenz
- ✓ Prävention

+ Neue Analyse

Starten Sie eine neue Analyse manuell

BMP importieren

Starten Sie mit einem Medikationsplan

BMP IMPORTIEREN

5 Patienten

ALLE PATIENTEN

? Erste Schritte

Neuinsteigern empfehlen wir einen Blick in unsere **Kurzanleitung MediCheck Online Pro** oder die **Gebrauchsanweisung MediCheck Online Pro** (PDF-Dateien).

Weitere hilfreiche Dokumente finden Sie in unseren **Arbeitshilfen** (jederzeit im Hauptmenü unter „mehr“).

Wenn Sie den MediCheck selbst erkunden möchten, bieten sich unsere **Beispielfälle** an.

Diese kurze Anleitung führt Sie durch die wichtigsten Funktionen des MediCheck Online Pro und gibt Ihnen einen Überblick, wie Sie den MediCheck verwenden können.

Weitere Informationen finden Sie in der **Gebrauchsanweisung**, die Sie unter „mehr“ bei den Arbeitshilfen oder im Bereich „**Erste Schritte**“ auf der Startseite finden.

Die Startseite

- 1 Starten einer neuen Analyse (manuell, Import eines BMP, Generieren des Links und Import aus Patientenfragebogen bzw. Checkliste für Pflegefachkräfte)
- 2 Aufrufen der Patientenübersicht
- 3 Liste Kontaktadressen, Beispielfälle und hilfreiche Arbeitshilfen
- 4 Ändern des Datenschutzpassworts, Einstellungen und Logout

The screenshot shows the MediCheck Online Pro interface. At the top, there are navigation tabs: 'Neue Analyse', 'Patienten', and 'mehr'. A dropdown menu is open under 'Neue Analyse', showing options like 'Manuelle Erfassung', 'Import aus Medikationsplan', and 'Import aus Patientenfragebogen'. Another dropdown menu is open under 'Patienten', showing options like 'Kontaktadressen', 'Beispielfälle', and 'Arbeitshilfen'. A profile menu is open in the top right corner, showing options like 'Profil anpassen', 'Datenschutzpasswort ändern', 'Einstellungen', and 'Logout'. The main content area features three cards: 'Neue Analyse' (with a red circle 1), 'BMP importieren' (with a red circle 1), and '5 Patienten' (with a red circle 2). Below these cards is a section titled 'Erste Schritte' with three columns of text. A red vertical label 'CE 0123 Medizinprodukt' is on the right side. A red circle 5 points to the 'Erste Schritte' section.

- 5 Nützliche Direktverknüpfungen für Ihre ersten Schritte mit dem MediCheck

Patientenfragebogen und Checkliste für Pflegefachkräfte

1. Patientenfragebogen und Checkliste für Pflegefachkräfte erstellen

MediCheck Online Pro Neue Analyse ▾ Patienten mehr ▾

Patientenfragebogen/Checkliste

Was ermöglicht der Patientenfragebogen / die Checkliste?

Mit Hilfe des Patientenfragebogens bzw. der Checkliste für Pflegefachkräfte haben Sie die Möglichkeit, Daten für die Medikationsanalyse vorab von dem Patienten oder im Rahmen der Heimversorgung von der Pflegefachkraft (entspricht Arbeitshilfe Checkliste für Pflegefachkräfte nach BAK) digital erfassen zu lassen und davon ausgehend eine Medikationsanalyse zu starten.

Zum digitalen Patientenfragebogen bzw. zur Checkliste gelangen Patienten oder Pflegefachkräfte einfach über den Link oder QR-Code, den Sie mit den untenstehenden Buttons generieren und an Patienten oder Pflegefachkräfte weitergeben können.

Bitte beachten Sie, dass nicht importierte Fragebögen bzw. Checklisten nach 90 Tagen automatisch unwiderruflich gelöscht werden.

LINK FÜR PATIENTEN LINK FÜR PFLEGEFACHKRÄFTE

CE 0123 Medizinprodukt

„Link für Patienten“ und „Link für Pflegefachkräfte“ oder QR-Code zur Vorabfassung durch Patient / Pflegefachkraft generieren

2. Patientenfragebogen und Checkliste für Pflegefachkräfte importieren

MediCheck Online Pro Neue Analyse ▾ Patienten mehr ▾

Patientenfragebogen/Checkliste

Was ermöglicht der Patientenfragebogen / die Checkliste?

LINK FÜR PATIENTEN LINK FÜR PFLEGEFACHKRÄFTE

Bereits übermittelte Fragebögen bzw. Checklisten

Suche x Filter ▾

Name, Vorname Geburtsdatum, Versicherungsnummer	Herkunft	Bearbeitungsstand	Eingesendet
Test, Anna 01.03.1946	Patientenfragebogen	• Noch nicht importiert	vor 7 Sekunden

IMPORTIEREN

CE 0123 Medizinprodukt

Benachrichtigung per E-Mail und im MediCheck (Glocke).

Im MediCheck können Sie unter „Bereits übermittelte Fragebögen bzw. Checklisten“ die Daten der Fragebögen bzw. Checklisten über den „Import“- Button direkt in den MediCheck übernehmen und eine Medikationsanalyse starten.

Achtung!

Nicht importierte Fragebögen bzw. Checklisten werden nach 90 Tagen automatisch gelöscht.

Die Patientenübersicht und individuelle Patientenakte

1. Die Patientenübersicht

- 1 Anlegen eines neuen Patienten (Stammdaten, individuelle und medizinische Besonderheiten etc.)
- 2 Bereits angelegte Patienten über das Suchfeld oder den Filter suchen
- 3 Hinterlegen von patientenindividuellen Notizen
- 4 Auskunft über den Bearbeitungsstatus und die Anzahl der vorhandenen Medikationsanalysen eines Patienten und weitere Informationen wie z. B. Heimpatient, Import aus Warenwirtschaft
- 5 Anzeige der offenen Aufgaben

Farbliche Kennzeichnung des Bearbeitungsstatus beim jeweiligen Patienten:

	offene Analysen oder Analysen in Bearbeitung
	ausschließlich abgeschlossene oder irrelevante Analysen
	ausschließlich irrelevante Analysen
	erneute Leistungserbringung möglich

2. Die individuelle Patientenakte

Öffnen Sie die individuelle Patientenakte durch Anklicken des Patientennamens

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7

Art des Dokuments	Fortschritt	Erstellt	Geändert	Team	Status
Medikationsanalyse Bezeichnung vergeben	🔄	27.11.2024 12:19 Uhr	vor 36 Sekunden MedCheck Team		offen
Levodopa Benserazid	100 mg 25 mg	Madoper 125mg	1 - 1 - 1 - 0	Stück	Morbus Parkinson
Metoprolol hydrochlorid-1-Wasser	30 mg	MCP AL 10	1 - 0 - 0 - 0	Stück	Übelkeit und Brechsymptome
Lercanidipin hydrochlorid	20 mg	Lercanidipin Heumann 20mg	1 - 0 - 0 - 0	Stück	Hypertonie
Lercanidipin hydrochlorid	10 mg	Carmen 10mg	1 - 0 - 0 - 0	Stück	Hypertonie
Salbutamol	0,1 mg	Salbu Easyhaler 0,1mg/Dosis	1-2 Sprühdosier bei Bedarf	Sprühdosier	Asthma bronchiale

- 1 Bearbeitungsmöglichkeit der Patientendaten (Stammdaten, individuelle und medizinische Besonderheiten, Kontaktadressen etc.)
- 2 Aufklappbare Kurzzinformation der Analyse
- 3 Vergeben einer Bezeichnung für die einzelnen Medikationsanalysen des Patienten
- 4 Analyse öffnen durch Klick auf „Medikationsanalyse“ oder Fortschritt-Buttons
- 5 Anlegen einer neuen Analyse
- 6 Auskunft über offene /erledigte Aufgaben zum ausgewählten Patienten
- 7 Hinterlegen des aktuellen Status einer Medikationsanalyse



Eingabemaske - „easy in“

Auf der Eingabeseite erfassen Sie in vier Schritten alle Daten, die Ihnen vorliegen (Medikation, Probleme / Symptome und - falls bekannt - Labor- / Vitalwerte sowie Erkrankungen / Allergien / Lebensumstände).

1 → Medizinprodukt

2 → Medizinprodukt

3 → Medizinprodukt

4 →

5 →

6 → SPEICHERN UND ANALYSIEREN

- 1 Individuelle Angaben zum Patienten / Patientennotiz ausklappen und ggf. ergänzen
- 2 Weitere Informationen zum Arzneimittel eintragen, z. B. abweichendes Patientenverhalten
- 3 Dropdown der zugelassenen Indikationen (werden in Schritt 4 „Erkrankungen / Allergien / Lebensumstände“ übernommen)
- 4 Weitere Funktionen wie z. B. ATHINA-Datentransfer oder Medikationsplan im BMP-Manager individuell und patientengerecht erstellen
- 5 Tragen Sie unter Schritt 2 die Probleme der Patienten zur Prüfung auf deren mögliche Ursachen ein.
- 6 Mit „Speichern und Analysieren“ gelangen Sie zum Analyseergebnis.

Filterung des Analyseergebnisses

Probleme / Symptome (aktuelle)
Unruhe (innere), Schlafstörung, Herzfrequenz (erhöht), Blutdruck (erniedrigt)

Ursachen mit Arzneimittelbezug

Dosis überdosiert ⓘ

- ▼ Lercanidipin hydrochlorid, Metoclopramid hydrochlorid ✓ Arzt

Nebenwirkungen ⓘ

- ▼ Unruhe (innere) ✓ Arzt
- ▼ Schlafstörung nicht relevant
- ▼ Herzfrequenz (erhöht)
- ▼ Blutdruck (erniedrigt)

CE 0123 Medizinprodukt

- 1 Innerhalb des Ergebnisfilters haben Sie die Möglichkeit, den Typ der Analyse zu wählen.
- 2 Für eine übersichtliche Gestaltung der Ausgabeseite kann das Analyseergebnis nach Risikostufen
- 3 oder nach bereits markierten Ergebnissen „an Arzt“ und / oder „an Patient“ gefiltert werden.

Ergebnisse filtern

1 Typ 3 (alles) ⓘ

- Risiken: sehr hoch (rot)
- Risiken: mittel – hoch (orange)
- Risiken: gering – mittel (gelb)
- Risiken: sonstige (grau)
- Adhärenz und Prävention

- an Arzt (ausgewählt: 2)
- an Patient (ausgewählt: 0)

- Standard

CE 0123 Medizinprodukt

Auswahl eines Check-Ergebnisses

1 Von Ihnen „an Arzt“ oder „an Patient“ ausgewählte Ergebnisse werden in das jeweilige Ergebnis-PDF übernommen.

2 Schnelle Dokumentationsmöglichkeit

3 Fallfreigabe und Kommentare an Kollegen im Rahmen des Fall-Sharings sind unter „Team“ möglich. (Die Kommentare werden nicht ins Ausgabe-PDF übernommen).

Mehr Informationen zum Fall-Sharing unter www.pharma4u.de/apotheker/medicheck/infos/fall-sharing

4 Einfügen von Hinweisen „an Arzt“ oder „an Patient“

5 Alle Texte sind frei editierbar und werden in das Ergebnis-PDF der entsprechenden Zielgruppe übernommen. Der ursprüngliche Text bleibt im Bereich „Originaltext“ unverändert erhalten.

Zusammenfassung des Analyseergebnisses

Zusammenfassung der Analyse (optional)

AN ARZT AN PATIENT NOTIZEN TEAM

Ihre eigene Zusammenfassung an Fachkreise:

B **I** **↺** **U** **☰** **☰** ↶ ↷

Zusammenfassung für PDF an Arzt

Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. 0/50000

Kommentare (Kollegen / Fallfreigabe) 1

Bisher keine Kommentare

pharma4u GmbH (Moderator)

Kommentar

SPEICHERN

© 2022 Medizinprodukt

Unterhalb der Check-Ergebnisse können Sie Ihre priorisierten Ergebnisse zusammengefasst „an Arzt“, „an Patient“ oder Ihre eigenen Notizen eintragen. Diese Zusammenfassung „an Arzt“ bzw. „an Patient“ wird in das entsprechende PDF übernommen.



Digitale Kommunikation - „easy com“



Der MediCheck bietet verschiedene Möglichkeiten der Kommunikation und der Weiterverarbeitung des Analyseergebnisses.

1 Direkt per E-Mail als passwortgeschütztes PDF senden und mit Arzt bzw. Ärztin direkt im PDF digital kommunizieren.

Mehr Informationen zur digitalen Kommunikation unter www.pharma4u.de/apotheker/medicheck/arbeitshilfen/

2 Fall mit Tutoren oder Kollegen teilen und mittels Kommentarfunktion besprechen.

Mehr Informationen zum Fall-Sharing unter www.pharma4u.de/apotheker/medicheck/infos/fall-sharing/

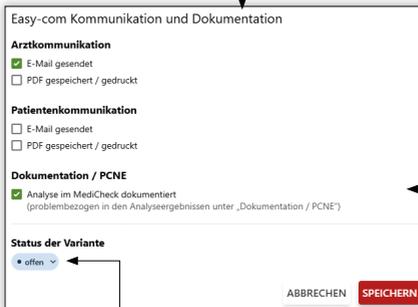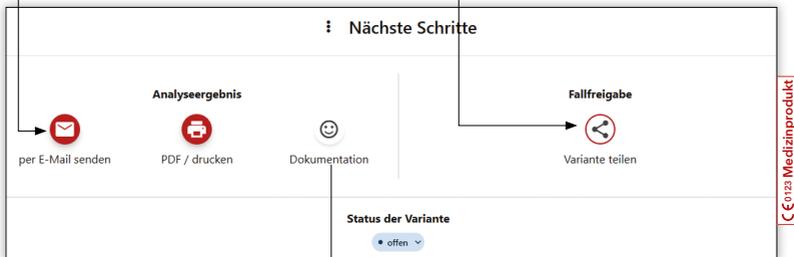

3 Bereits durchgeführte Aktionen werden automatisch mit einem Häkchen markiert. Bei Bedarf können Häkchen sowohl manuell gesetzt als auch entfernt werden.


4 Sie können den Status einer Medikationsanalyse im Dokumentationsfenster, am Ende des Analyseergebnisses oder in der individuellen Patientenakte anpassen.

Jetzt durchstarten!



Eingabemaske - „easy in“

- Import aus BMP, Warenwirtschaft, ATHINA (inkl. Export)
- Vorabfassung durch Fragebogen Patient / Checkliste Pflegefachkraft
- In 4 Schritten - entlang des roten Fadens

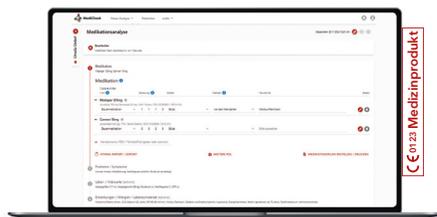

CE 0123 Medizinprodukt



Analyseergebnis - „easy out“

- Individuelle Ergebnisauswahl
- Einstellbarer Analysetyp
- Lösungsvorschläge
- Dokumentationsmöglichkeit




CE 0123 Medizinprodukt



Kommunikation - „easy com“

- BMP-Manager für aktuelle, laienerechte Medikationspläne
- Fall-Sharing (Fälle teilen und per Kommentarfunktion besprechen)
- Digitale Arzt-Apotheker-Kommunikation
- Datenspeicherung und Dokumentation

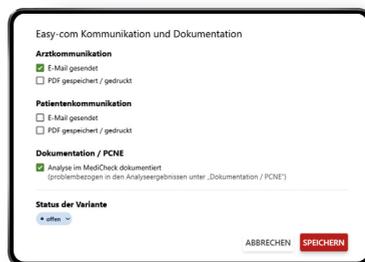

CE 0123 Medizinprodukt

Noch Fragen?

Schicken Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an:

info@pharma4u.de

+49 6196 202 558-0



Vertreiber/Händler und Lizenzgeber:
pharma4u GmbH
Apothekerhaus
Carl-Mannich-Straße 26
65760 Eschborn

Hersteller:
Johner Medical GmbH
Niddastraße 91
60329 Frankfurt a. M.

